




A0050401

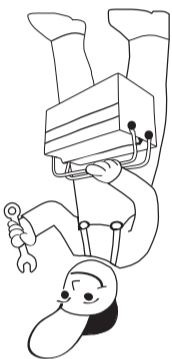

max. 150 kg
330 lbs

RIDDER | Assistenz
★★★★★ COMFORT


RIDDER GmbH
Ridder Straße 1
D-56379 Singhofen
Tel.: +49 (2604) 9541-0
Mail: info@ridder-online.de
www.ridder-online.de



1x




1x






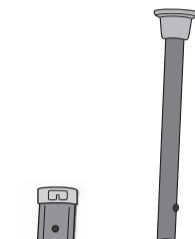


4x

4x

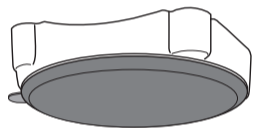

1x

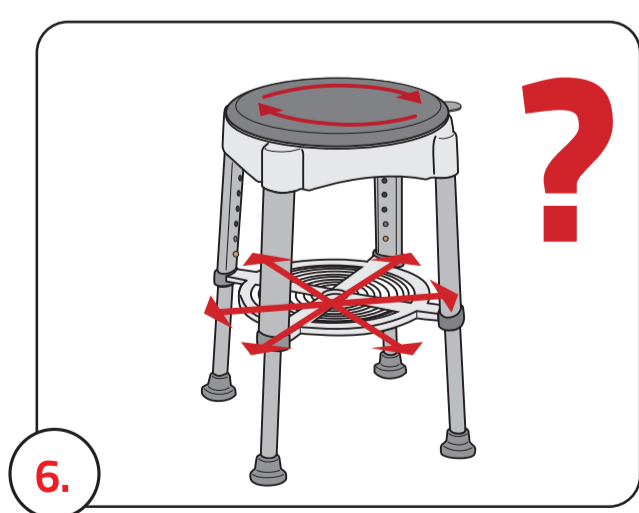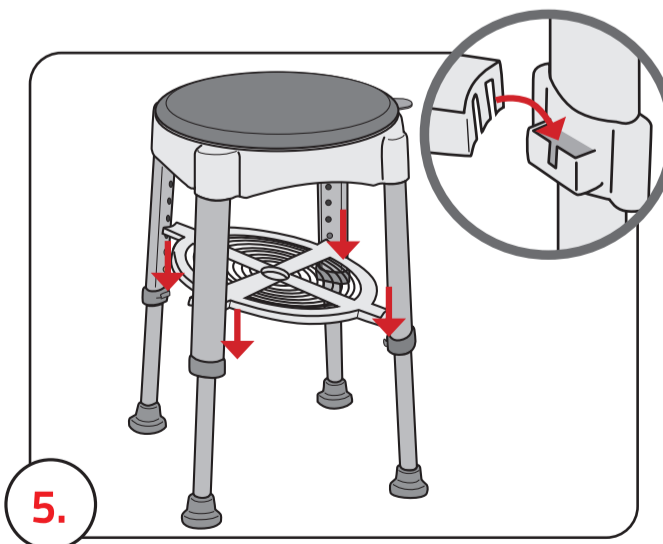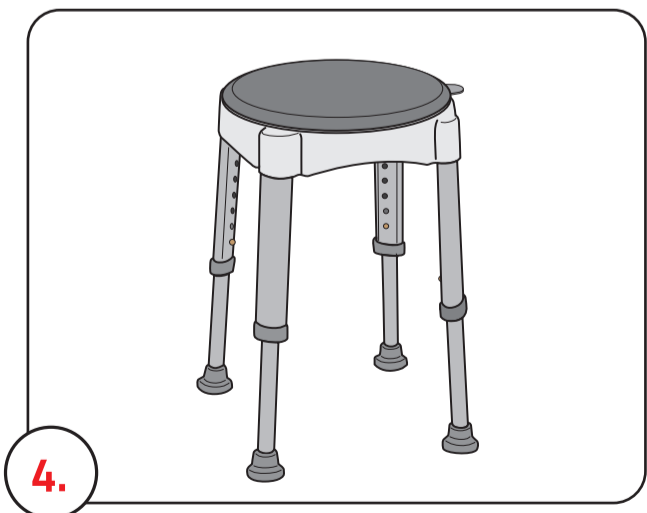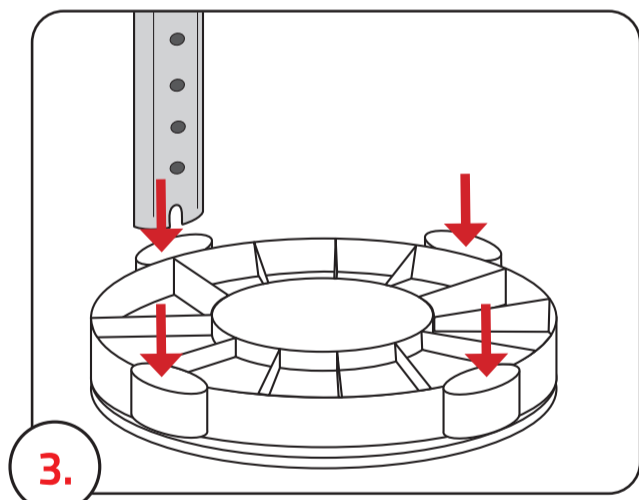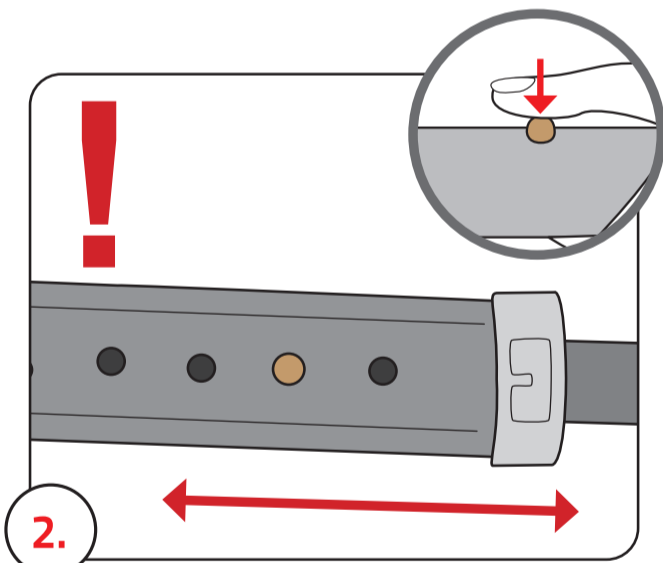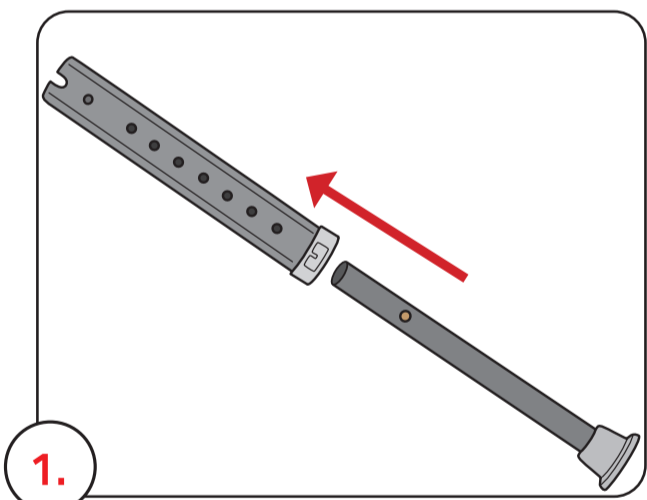

DE I HINWEIS!

Sehr geehrter Kunde, bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die weitere Nutzung auf. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei fehlerhafter Montage oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts.

Sicherheitshinweise: Der Hocker ist zur Nutzung in Nassräumen ausgelegt und dient ausschließlich als Sitzmöglichkeit während dem Duschen und im privaten Bereich. Vor dem Gebrauch die Position der Höhenverstellung des Sitzes überprüfen. Die FüÙe müssen an allen 4 Auflagepunkten aufliegen. Nicht auf die SitzfläÙche stellen. Verpackungsmaterialien von Kindern fern halten. Feuchte Oberflächen können die rutschhemmenden Eigenschaften verschlechtern. Die Zertifizierung schließt keine Prüfungen für den Einsatz im Bereich der Reha- und medizinischen Betreuung von Personen mit ein. Empfohlene Nutzungsdauer: max. 5 Jahre. Bei Beschädigung nicht mehr verwenden.

Reinigungs- und Pflegehinweise: Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Pflegehinweise. Bei unsachgemäÙer Druchführung kann das Produkt beschädigt werden. Reinigen Sie das Produkt sanft mit Wasser und handelsüblichem Haushaltsreiniger. Trocknen Sie das Produkt anschließend mit einem Tuch ab.

GB I NOTE!

Dear customer, please read the safety instructions carefully before use and keep the manual for further use. The manufacturer assumes no liability for faulty assembly or improper use of the product.

Safety instructions: This product is produced for applying in damp or wet rooms and solely serves as seat during the shower and for private using. Before every use check the position of the height adjustment of the seat. All feet must be overlying on the contact points. Do not stand on the seat. Keep packaging materials away from children. Moist surfaces can impair the anti-slip function. The certificate does not contain tests for the use of people/patients who are in rehab or medical care sectors. The recommended maximum usage is 5 years. Do not use if the product is damaged.

Cleaning and care instructions: Please pay attention to the cleaning and care instructions. In the case of improper use the product can be damaged. Clean it carefully with water and standard commercial detergents. Subsequently, you can dry the product with a cloth.

FR I REMARQUE!

Cher client, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant l'utilisation et veuillez les conserver pour une utilisation ultérieure si besoin est. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de montage incorrect ou d'utilisation inadaptée.

Consignes de sécurité: Le tabouret est conçu pour être utilisé dans des pièces humides et sert exclusivement à s'asseoir pendant la douche et dans le domaine domestique. Avant l'utilisation vérifier que les 4 pieds du tabouret soit bien réglés à la même hauteur.Les pieds doivent impérativement reposer sur les 4 points d'appui. Ne pas se lever sur le siège. Garder les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Si la surface est humide, les propriétés antidérapantes peuvent être affectées. La certification n'inclut aucun test pour une utilisation dans le domaine de la rééducation et de l'assistance médicale à la personne. La durée maximale d'utilisation recommandée du produit est de 5 ans. Ne plus utiliser en cas de dommage.

Consignes de nettoyage et d'entretien: Veuillez respecter les consignes de nettoyage et d'entretien. Le non-respect de ces consignes peut endommager le produit. Veuillez nettoyer le produit délicatement avec de l'eau et un nettoyant ménager doux. Frotter ensuite le produit avec un chiffon pour le sécher.

ES I ¡NOTA!

Estimado cliente, por favor lea las instrucciones de uso con atención antes de usar el producto y guárdelo para futuros usos. El fabricante no se responsabiliza de un montaje mal realizado o de un uso indebido del producto.

Instrucciones de seguridad: Este producto está hecho para lugares húmedos o mojados y solo sirve de asiento durante la ducha o para el uso privado. Antes de cada uso verifique la posición y la altura del asiento. Todas las patas deben estar apoyadas por igual. No levantarse sobre el asiento. Mantenga los materiales del embalaje alejados de los niños. Las superficies húmedas pueden afectar la función antideslizante. El certificado no contiene tests para uso en personas/pacientes que se encuentran en rehabilitación o en cuidado médico. Recomendamos un uso máximo de 5 años. No usar si el producto si este dañado.

Instrucciones de limpieza y cuidado: Por favor preste atención a las instrucciones de limpieza y cuidado. Un uso indebido del producto puede dañarlo. Limpielo cuidado usando papel y un detergente estándar. Puede secarlo con un trapo normal.

RU I ВНИМАНИЕ!

Уважаемый клиент, перед использованием внимательно прочитайте инструкции по технике безопасности и сохраните их для дальнейшего использования. Производитель не несет ответственности за неправильную установку или неправильное, не целевое использование продукта.

Безопасность: Табурет предназначен для использования во влажных помещениях и служит только в качестве сиденья во время принятия душа и в частной зоне. Перед установкой проверьте положение регулировки высоты сиденья. Ножки должны равномерно опираться на все 4 опорные точки. Не стоять на сиденье. Храните упаковочные материалы вдали от детей. вогкая/мокрая поверхность может ухудшить противскользящую функцию. Сертификация не включает в себя тестирование для использования в реабилитационных и медицинских центрах. Рекомендуемый срок службы продукта - макс. 5 лет. Не используйте продукт, если он повреждён.

Инструкции по чистке и уходу: Пожалуйста примите во внимание инструкции по чистке и уходу. Неправильное, не целевое использование продукта может привести к повреждению изделия. Аккуратно очистите продукт водой и коммерческим чистящим средством. Затем высушите продукт тряпкой.

CZ I POZNÁMKA!

Vážený zákazník, před použitím si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a uschovejte si jej pro další použití. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za vadnou montáž nebo nesprávné použití výrobku.

Bezpečnostní instrukce: Tento výrobek se vyrábí pro aplikaci ve vlhkých nebo mokrých místnostech a slouží výhradně jako sedadlo při sprchování a pro soukromé použití. Před každým použitím bezpodmínečně zkontrolujte stejnoměrné nastavení výšky. Nožky musí doléhat ve všech 4 operných bodech. Nestoupejte na sedadlo. Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Vlhké povrchy mohou zhoršit protiskluzové vlastnosti. Certifikát neobsahuje testy pro použití osob / pacientů, kteří jsou v sektoru rehabilitace nebo lékařské péče. Doporučené maximální použití: 5 let. Nepoužívejte, pokud je výrobek poškozen.

Pokyny k čištění a péči: Věnujte pozornost pokynům na čištění a péči. V případě nesprávného použití může dojít k poškození výrobku. Pečlivě jej vyčistěte vodou a běžnými komerčnimi čistícími prostředky. Následně můžete výrobek sušit hadříkem.

DK I BEMÆRK!

Kære kunde, læs venligst sikkerhedsmanualen omhyggeligt, før brug af produktet, og gem denne for senere brug. Producenten påtager sig intet ansvar for mangelfuld montering eller forkert brug af produktet.

Sikkerhedsinstruktioner: Produktet er produceret til brug I dampet eller våde badeværelser, og tjener udelukkende til brug under bad og til privat brug. Før brug, tjek da alle positioner på højdejusteringen af sædet. Alle fødder skal være overliggende på kontaktpunkterne. Stå ikke på sædet. Opbevar emballagematerialer væk fra børn. Fugtige overflader kan påvirke anti-slip funktionen. Certifikatet indeholder ikke tests til brug for mennesker/patienter der er I rehabilitering eller til brug I lægehuse eller på hospitaler. The anbefalede maksimumbrug er 5 år. Benyt ikke produktet, hvis dette er skadet.

Instruktioner til rengøring og vedligeholdelse: Læs venligt både instruktioner til rengøring samt vedligeholdelse. I tilfælde af forkert brug, kan produktet blive beskadiget. Rengør produktet grundigt, med vand og almindelige rengøringsmidler. Derefter kan produktet tørres af med en klud.

EE I MÄRGE!

Hea klient, palun lugege enne kasutamist ohutu kasutamise juhiseid ja hoidke need edaspidiseks kasutamiseks alles. Tootja ei vastuta toote vale kokkupaneku või ebaõige kasutamise eest.

Turvalise kasutamise juhised: Antud toode on loodud kasutamiseks niisketes ruumides ning võib täita vaid istme funktsiooni duši all käimise ajal, sobib vaid isiklikuks kasutamiseks. Enne igakordset kasutamist kontrolli toote paigalduskõrgust. Kõik jalad peavad asetsema kontaktpunktidel. Ärge seiske istmel. Hoidke pakendimaterjalid lastelt ära. Niiске pind võib mojutada libisemisvastast funktsiooni. Sertifikaat ei sisalda testimist rehabilitatsiooni- või raviasutustes viibivate inimeste poolt kasutamise tingimustes. Maksimaalne soovitatav kasutusiga on 5 aastat. Rikkis toodet kasutada ei tohi.

Puhastus- ja hooldusjuhend: Palun järgi puhastus- ja hooldusjuhendit. Mitteotstarbeka kasutamise tagajärjel võib toodet kahjustada. Puhasta hoolikalt vee ja tavalise pesuvahendiga. Pärast pesemist kuivata toodet lapiga.

FI I HUOMAUTUS!

Hyv  asiakas, lukekaa turvallisuusohjeet huolellisesti ennen k ytt   ja s ilytt k   ne myohemp   k ytt   varten. Valmistaja ei vastaa tuotteiden ohjeidenvastaisteta asennuksesta tai asiankuulumattomasta k ytstst .

Turvallisuusohjeet: Jakkara on tarkoitettu k yttett v ksi kodin m rk tiloissa pelk st  n istumiseen suihkun aikana. Tarkista istuimen korkeuden s tst asento ennen k ytt  . Jalcojen on oltava tuettuna kaikissa 4:ss  tukipisteess .  l  seiso istuimella. Pid  pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Kosteat pinnat voivat heikent   liukastumisen est vi  ominaisuuksia. Tuotesertifikaatti ei sulje pois tuotteiden k ytt   l aketieteellisess  kuntoutuksessa. Tuotteiden suositeltu k yttt ik  on enint  n 5 vuotta. Tuotetta ei saa k ytt   jos sen on vaurioitunut.

Puhdistus- ja hoito-ohjeet: Huomioikaa puhdistus- ja hoito-ohjeet. Ep asianmukainen puhdistus voi vahingoittaa tuotetta. Puhdista tuote kevyesti vedell  ja kaupallisella puhdistusaineella. Kuivatkaa tuote sitten kankaalla.

HR I BILJEŠKA!

Dragi kupce, bpažljivo pročitajte sigurnosne upute prije uporabe i  uvajte priručnik za daljnju uporabu. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za neispravnu montažu ili nepravilno korištenje proizvoda.

Sigurnosne upute: Ovaj proizvod je proizveden za korištenje u vlažnim ili mokrim prostorijama i služi samo kao stolac za vrijeme tuširanja i za privatnu uporabu. Sve 4 noge moraju sigurno nalijegati na podlogu. Nemojte stajati na sjedalu. Držite materijal za pakiranje od djece. Vlažne površine mogu umanjiti zaštitu protiv Proklizavanja. Certifikat ne sadrži testove za korištenje osoba / pacijenata koji se nalaze u sektorima rehabilitacije ili medicinske skrbi. Preporučena maksimalna uporaba: 5 godina. Nemojte ga koristiti ako je proizvod oštećen.

Upute za čišćenje i njegu: Obratite pozornost na upute za čišćenje i njegu. U slučaju nepravilne uporabe proizvod se može oštetiti. Pažljivo ga očistite vodom i standardnim komercijalnim deterđentima. Nakon toga proizvod možete osušiti krpom.

HU I CÉLZÁS!

Tisztelt vás rl , k rj k, figyelmesen olvassa el figyelmesen a biztons gi utasításokat,  s tartsa meg  ket további felhasznál s c lj b l. A gy rt  nem vállal felel ss get a term k helytelen beszerel s ert vagy helytelen haszn lat ert.

Biztons g: A sz klet nedves helyis gekben val  haszn latra k sz lt,  s csak zuhanyoz s k zben  s a mag nterületen szolg l. Haszn lat el tt ellen rizze az  l smagass g  llítás t. A l baknak mind a 4 t mogat si ponton nyugodniuk kell. Ne  lljon az  l k re. Tartsa t val a csomagol anyagokat a gyermekekt l. A nedves fel letek cs kkenthetik a cs sz sg tl  funkci t. A alkalmass gi bizonyítvány nem tartalmazza a szem lyek rehabilit ci j ra  s orvosi ell t s ra vonatkoz  vizsg latokat. A term k aj nlott  lettartama max. 5  v. Ne használja, ha s r lt.

Tisztít si  s  pol si utasítások: K rj k, vegye figyelembe a tisztít si  s  pol si utasításokat. A nem megfelel  kezel s k rosíthatja a term ket.  vatosan tisztítsa meg a term ket v zzel  s h ztart si tisztít szerezrel. Ezut n szárítsa meg a term ket egy ruh val.

IT I NOTA!

Caro cliente, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima dell'uso e conservare il manuale per ulteriori utilizzi. Il produttore non si assume alcuna responsabilit  per il montaggio difettoso o l'uso improprio del prodotto.

Istruzioni di sicurezza: Questo prodotto   prodotto per l'applicazione in ambienti umidi o bagnati e serve esclusivamente come sedile durante la doccia e per uso privato. Prima di ogni uso,   assolutamente necessario verificare che il dispositivo di regolazione verticale sia posizionato alla stessa altezza. I piedi devono poggiare sui 4 punti di appoggio. Non salire sul sedile. Tenere i materiali di imballaggio lontani dai bambini. Le superfici umide possono compromettere l'azione antiscivolo.Il certificato non contiene test per l'uso di persone / pazienti che si trovano in settori di riabilitazione o assistenza medica. Utilizzo massimo consigliato: 5 anni. Non usare se il prodotto   danneggiato.

Istruzioni per la pulizia e la cura: Si prega di prestare attenzione alle istruzioni di pulizia e cura. In caso di uso improprio, il prodotto pu  essere danneggiato. Pulire accuratamente con acqua e detersenti commerciali standard. Successivamente,   possibile asciugare il prodotto con un panno.

LT I PASTABA!

Gerbiamas kliente, atid iai perskaitykite saugos reikalavimus prieš naudojant ir laikykites naudojimosi instrukcijos. Gamintoj s neprisiima atsakomyb s, jeigu prek  buvo netinkamai surinkta arba netinkamai naudojama.

Saugos instrukcija: Šis produktas skirtas naudoti dr gnose ar šlapiose patalpose kaip dušo s dyn  asmeniniam naudojimui. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite s dyn s aukščio reguliavimo pad tį. Visos kojel s turi b ti u fiksuotos ties kontaktiniais taškais. Nestov kite ant s dyn s. Laikyti pakuo s medžiagas nuo vaikų. Dr gnas paviršius silpnina neslystančio paviršiaus funkcij . Netestuota, kad produktas b tų skirtas ligoniams/ pacientams, kurie yra reabilitacijos ar sveikatos priežiūros įstaigose. Rekomenduojamas maksimalus naudojimas - 5 metai. Nesinaudokite pažeistai ar sugadintu produktu.

Valymo ir priežiūros instrukcijos: Atkreipkite dėmesį į valymo ir priežiūros instrukcijas. Netinkamai naudojant, produktas gali b ti pažeistas. Valykite vandeniu ir valymui tinkančiais valikliais. Nausausinkite sausa šluoste.

LV I PIEZĪME!

Cien klient, Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus un saglabājiet šo instrukciju turpm kai u ziņai. Ražot js neuzņemas nek du atbildību par produkta nepareizu uzst dīšanu vai nepareizu lietošanu.

Drošības nor dījumi: Šis produkts ir paredz ts lietošanai mitr s vai slapj s telp s un kalpo tikai un vienīgi k  s dekļis duš  un priv tai lietošanai. Pirms katras lietošanas p rbaudiet s dekļa augstuma regul šanas pozīciju. Vis m k j m j atrodas uz kontakta punktiem. Nenovietojiet uz s dekļa. Uzglab t iepakojuma materi lus prom no b rniem. Mitr  virsma var paslīktin t pretslīdes funkciju. S j  sertifik t  nav iekļauti testi lietošanai cilvēkiem/pacientiem rehabilitācijas vai medicīnisk s apr pes sektoros. Maksim lais ieteicamais lietošanas laiks ir 5 gadi. Nelietot, ja produkts ir boj ts.

Tīrīšanas un apkopes nor dījumi: Iev rojiet tīrīšanas un apkopes nor dījumus. Nepien cīgas lietošanas gadījum  produktu var saboj t. J tira rūpīgi ar  deni un standarta komerci lajiem tīrīšanas līdzekļiem. P c tam var noslaucīt ar dr nu.

NL I AANWIJZING!

Geachte klant, a.u.b. voor gebruik zorgvuldig de veiligheidsaanwijzingen doorlezen en deze voor later gebruik opbergen.De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid bij niet correcte montage of onoordeelkundig gebruik van het product af.

Veiligheidsaanwijzing: De kruk is voor gebruik in natte ruimtes ontworpen en dient uitsluitend als zitmogelijkheid tijdens het douchen bij particuliere gebruik. Voor het gebruik de positie van de hoogterstelling van de kruk controleren. De poten moeten alle 4 op de vloer staan. Ga niet op de stoel staan. Verwijder verpakkingsmateriaal van kinderen. Vochtige oppervlakken kunnen de antislip eigenschappen verminderen. De certificering geldt niet voor behandeling van personen in de paramedische of medische sector. De geadviseerde gebruiksduur van het product is max. 5 jaren. Bij beschadigingen niet meer gebruiken.

Reinigen en onderhoud: Wilt u a.u.b. de reinigings-, en onderhoudsadviezen in acht nemen. Bij onoordeelkundig gebruik kan het product beschadigen. Reinig het product voorzichtig met water en een in de detailhandel verkrijgbaar huishoudreinigingsmiddel. Droog daarna het product met een doek af.

NO I ANVISNINGER!

Kj re kunde, les sikkerhetsinstruksjonene nøyf r du bruker produktet og oppbevar dem for senere bruk. Produzenten p tar seg intet ansvar for feil montering eller feil bruk av produktet.

Sikkerhetsanvisninger: Krakken er beregnet for bruk i vatrom og skal bare brukes som et sete under dusjing og i private hjem. Kontroller posisjonen til h ydereguleringen av setet f r hver bruk. Fottene ma hvile pa alle 4 stottepunktene. Ikke st  p  setet. Hold emballasjemateriell borte fra barn. Fuktige overflater kan svekke anti-skli funksjonen. Sertifiseringer omfatter ikke prover for bruk i rehabilitering og medisinsk behandling av personer. Anbefalt brukstid for produktet: maksimalt 5 ar. Produktet ma ikke brukes hvis det har skader.

Anvisninger for rengjoring og stell: Folg anvisningene for rengjoring og stell. Hvis det utfores feil, kan produktet bli skadet. Rengjor produktet forsiktig med vann og vanlig rengjoringmiddel. Tork produktet med en klut etterpa.

PT I NOTA!

Estimado Cliente, por favor, leia com aten o as instru es de seguran a antes de utiliza o e guarde este manual para futuras consultas. O fabricante n o se responsabiliza por m  montagem ou uso indevido do produto.

Instru es de seguran a: Este produto foi concebido para ser utilizado em ambientes h midos. Serve apenas como assento durante o banho e exclusivamente para uso privado. Antes de qualquer utiliza o verificar o posicionamento do assento. Todos os pontos de contacto devem estar bem assentes. N o fique em p  no banco. Mantenha as embalagens afastadas das crian as. As superf cies h midas podem anular o efeito antiderrapante. A certifica o do produto n o contempla a utiliza o por pessoas ou pacientes de centros de reabilita o ou a necessitar de cuidados m dicos. A utiliza o m xima recomendada   de 5 anos. N o utilizar o produto se este estiver danificado.

Instru es de limpeza e outros cuidados a ter: Por favor, tenha em aten o as instru es de limpeza e cuidados a ter. No caso de utiliza o indevida, o produto pode danificar-se. Limpar cuidadosamente com  gua e detergentes comuns. De seguida, pode limpar o produto com um pano.

SE I NOTERA!

B sta kund, var noga med att l sa s kerhetsanvisningarna noggrant f re anv ndning och f rvara dem f r vidare anv ndning. Tillverkaren  tar sig inget ansvar f r felaktig installation eller felaktig anv ndning av produkten.

S kerhets tg rder: Pallen   utformad f r anv ndning i v trum och  r endast avsedd som sittplats under duschen och i det privata omr det. Kontrollera positionen av sitsh jden f re anv ndning. F tterna m ste ha kontakt p  alla 4 st d-punkter. St  inte p  s tet. F rvara f rpackningsmaterial borta fr n barn. Fuktiga ytor kan f rs mra antislippfunktioner. Certifieringen omfattar inte unders kningar f r anv ndning vid rehabilitering och v rd av personer. Den rekommenderade anv ndningsperioden f r produkten  r max. 5  r. Anv nd inte om den  r skadat.

Reng ring och sk tselr d: Observera reng rings- och sk tselr d. Felaktig anv ndning kan skada produkten. Reng r produkten f rsiktigt med vatten och l mplig reng ringsmedel. Torka sedan produkten med en trasa.

SI I OPOMBA!

Dragi kupec, pred uporabo natan no preberite varnostna navodila in prilo nik shranite za nadaljnjo uporabo. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za napa no montažo ali nepravilno uporabo izdelka.

Varnostna navodila: Ta izdelek je izdelan za nanašanje v vlažnih ali mokrih prostorih in služi samo kot sedež med prhanjem in za zasebno uporabo. Pred vsako uporabo obvezno preverite,  e je ogrodje nastavljeno v isti višini. Vse 4 noge morajo biti poloene na stabilno in ravno površino. Ne stojite na sedežu. Odstranite embalažni material od otrok. Vlažne površine lahko poslabšajo funkcijo proti zdrsu. Potrdilo ne vsebuje testov za uporabo oseb / bolnikov, ki so v sektorju rehabilitacije ali zdravstvene oskrbe. Priporočena maksimalna uporaba: 5 let. Ne uporabljajte,  e je izdelek poškodovan.

Navodila za  iš enje in nego: Prosimo, upoštevajte navodila za  iš enje in nego. V primeru nepravilne uporabe se izdelek lahko poškoduje. Previdno ga o istite z vodo in standardnimi  istilnimi sredstvi. Nato lahko izdelek posušite s krpo.

RO I NOTĂ!

Dragi clienti, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare și păstrați manualul pentru utilizare ulterioară. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru montarea defectuoasă sau utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Instrucțiuni de siguranță: Acest produs este destinat utilizării în încăperi umede și servește exclusiv ca scaun în timpul dusului și pentru uz particular. Înainte de fiecare utilizare, verificați poziția reglării înălțimii scaunului. Toate picioarele trebuie să aiba contact cu suprafața. Nu urca pe scaun. Țineți materialul de ambalare departe de copii. Suprafețele umede pot afecta efectul antiderapant. Certificatul nu conține teste pentru utilizarea de catre persoane / pacienți care se află în sectoare de reabilitare sau de îngrijire medicală. Utilizare maximă recomandată: 5 ani. Nu utilizați dacă produsul este deteriorat.

Instrucțiuni de curatare și îngrijire: Acordați atenție instrucțiunilor de curățare și de întreținere. În cazul utilizării necorespunzătoare, produsul poate fi deteriorat. Curățați-l cu atenție cu apă și detergenți comerciali standard. Ulterior, puteți usca produsul cu o cârpă.